

## 遊四海 - 第二遊：2-1 佩戴、取下助聽器

### ➤ 有訂製耳模（型）

#### ※ 佩戴

- (1) 分辨左耳與右耳的助聽器
- (2) 拇指與食指捏住耳模與管子的交界處
- (3) 出音口對著耳道將耳模往前轉45度
- (4) 耳模尖端置入耳道開口處接著再往後轉入，使耳模與外耳殼密合
- (5) 再將助聽器掛在耳朵後方



#### ★ 注意

若出現回饋音(ㄍ - 的聲音)，代表未佩戴正確，重新佩戴至回饋音消失，才代表耳模放置正確。

## ※ 取下

- (1) 將掛在耳後的助聽器轉下來
- (2) 拇指與食指捏住耳模與管子交界處
- (3) 將耳模向前旋轉出來(或使用移除拉線)
- (4) 將耳模輕輕拉出

### 錯誤佩戴



### 正確佩戴





耳模沒有貼合耳朵

## ➤ 使用通用型耳塞

### ※ 佩戴

- (1) 分辨好左耳與右耳
- (2) 將助聽器掛在耳朵上
- (3) 將耳塞塞入耳道適當位子(不扭轉管子)
- (4) 將固定線適當放置於耳胛腔輔助固定

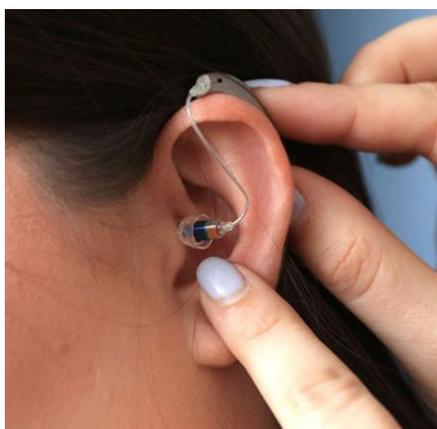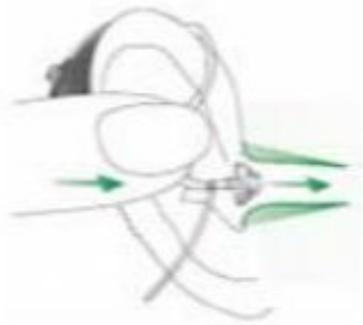




## ※ 取下

- (1) 拇指及食指捏住細管
- (2) 輕輕將耳塞移出耳道
- (3) 將掛在耳後的助聽器轉下來

## 錯誤佩戴



## 正確佩戴

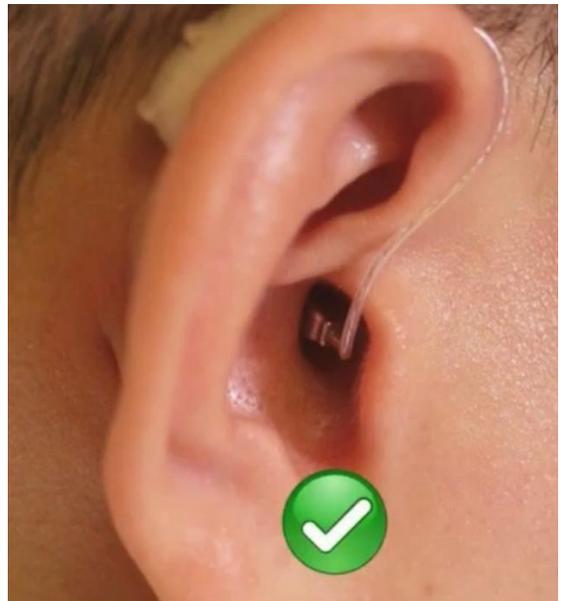


耳塞沒有置入耳道

## ➤ 耳內機

### ※ 佩戴

- (1) 分辨左耳與右耳
- (2) 拿起助聽器，出音口對著耳道(如下圖)
- (3) 將助聽器轉入耳道適當位子

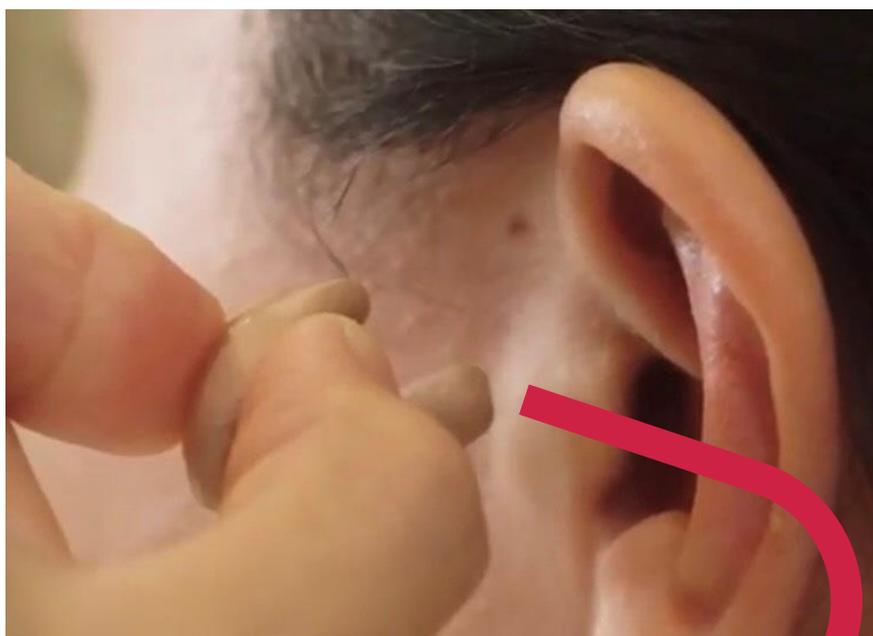

出音孔




## ※ 取下

- (1) 拇指及食指捏住助聽器後方
- (2) 將助聽器往前轉出  
( 或是使用移除拉線輕輕拉出 )

### 錯誤佩戴



### 正確佩戴

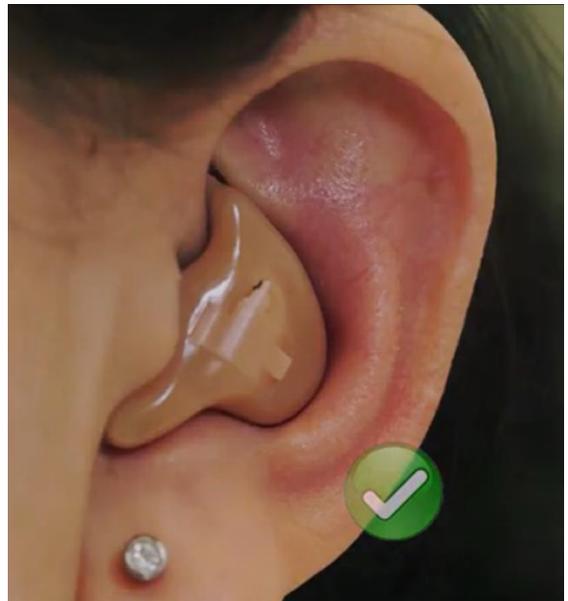

助聽器沒有貼合耳朵


## 遊四海 - 第二遊：2-2 開關機與電池

### ➤ 一般助聽器-開關機

關機：將電池蓋打開



開機：闔上電池蓋

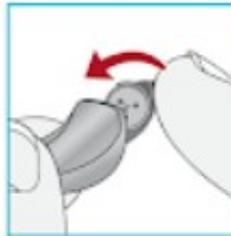

### ➤ 一般助聽器-電池更換方法



步驟 1：打開助聽器電池蓋



步驟 2：撕開新電池的貼紙，放置5分鐘



步驟 3：取出舊助聽器電池



步驟 4：電池〔+〕朝上放入助聽器



步驟 5：將電池蓋闔上

## ➤ 充電款助聽器-開關機

關機：助聽器放入充電座/盒

開機：助聽器從充電座/盒取出



## ➤ 充電款助聽器-充電方法

助聽器放入充電座即開始充電，

充電座也需定時充電維持電量。



## ➤ 電池常見問題

### (1) 助聽器電池和一般電池有什麼差別？

助聽器電池是「鋅空電池」，它是利用內池內的鋅化物和空氣結合的化學變化產生電力，因此一旦撕開電池上的貼紙，電池就開始耗電，若沒有要使用助聽器電池就別撕開貼紙。

鋅空電池能夠提供持續穩定的電壓，不用擔心電力不足而影響助聽器輸出的音量大小。

鋅空電池共有5種型號：A675、A312、A13、A10、A5，不同助聽器款式會使用不同電池型號。



## (2) 一顆助聽器電池可以使用多久？

電池實際可以使用的時間與助聽器款式、電池型號、氣候、使用者的聽力損失程度有關。

以微型耳掛型助聽器使用的A312電池為例，若一天使用助聽器8小時，一顆A312電池約可使用7-10天。

## (3) 助聽器專用電池要去哪裡買？

助聽器公司、聽力所、聽力中心，部分醫院及醫療器材行都有販售。